




# マスク及びCPAP付属品の使い方

イージーライフ  
EasyLife

- 本書は取扱説明書にかわる物ではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。
- フィルタの交換・取付はご使用の機器を確認し、裏面の「フィルタの取付方法」の項を参照しながら行って下さい。
- ご不明な点がございましたら、裏面のお客さまコールセンターまでお問合せ下さい。


## EasyLifeの特徴

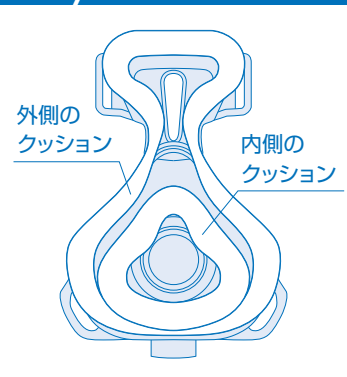

2つのクッションのうち、外側のクッションでマスクを安定させます。機器から空気が送られると自然に内側のクッションが顔に密着します。マスクを快適に装着するため、締め過ぎに注意してご使用下さい。


## マスク装着の手順

※鏡で確認しながら装着しましょう

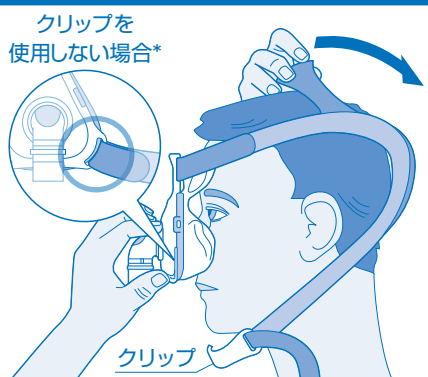


- 1**
- ・あらかじめヘッドギアを適当な長さに調整しておきます。
  - ・ヘッドギア下部の片方、または両方のクリップをはずしておきます。
  - ・マスクを鼻にあて、上からヘッドギアをかぶります。


\*マスクに直接ストラップを取り付け使用することもできます。

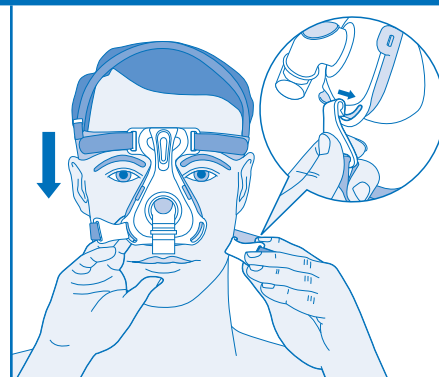

- 2**
- ・マスクを手で支えながら、クリップを取り付け部分にはめます。

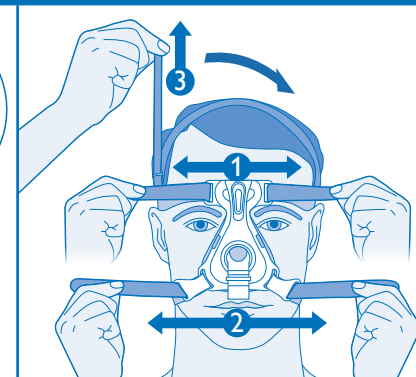

- 3**
- ・ヘッドギア上部のストラップをはがし、左右均等に引きながらテープをとめます。
  - ・ヘッドギア下部のストラップも同様にマスクのクッションが顔を圧迫しない所でとめます。
  - ・ヘッドギア頭頂部のストラップをはがし、垂直に引きながらテープをとめます。

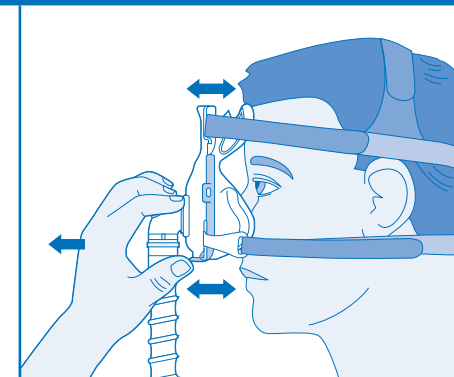


- 4**
- ・機器の電源を入れ、よく密着するようにマスクを軽く浮かしながら調整します。
  - ・調整を数回しても漏れが解消しない場合は、漏れがおこる部分に近いヘッドギアを調整します。

## トラブルと対処法


### マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアは締めすぎないように注意します。  
特に下部のヘッドギアは頬との間に指が1本入る程度に緩めます。

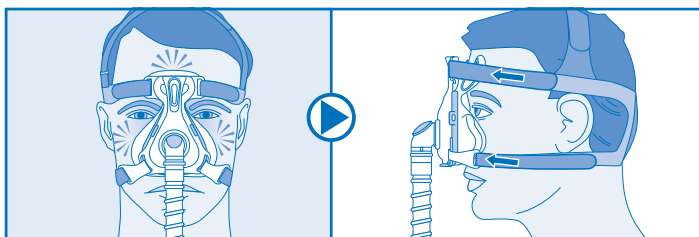


### 目の方に空気漏れがある場合

マスクが顔と平行になっていますか？  
ヘッドギアを顔が圧迫しないところでとめなおします。

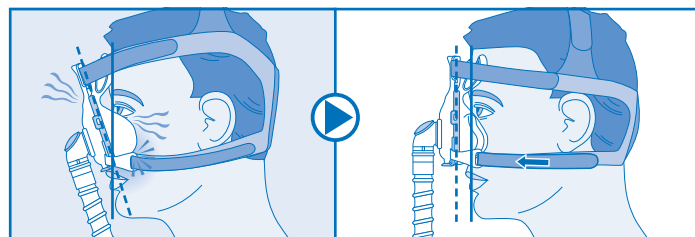


### 口の下の方に空気漏れがある場合

マスクが顔と平行になっていますか？  
ヘッドギアを顔が圧迫しないところでとめなおします。


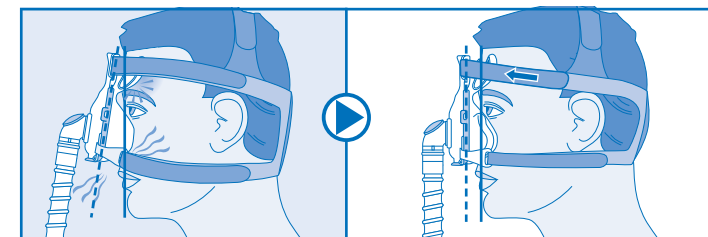


## フィルタの取付方法

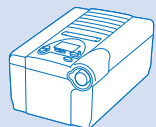



### REMstar BiPAP AutoSV

機器背面にあるフィルタカバーの左右両端を押しながら引き抜き、フィルタを取り除きます。新しいものに交換する際は右図の順で入れて最後にフィルタカバーを取付けます。極微細フィルタ(別売品)を使用しない場合は花粉フィルタのみを交換します。

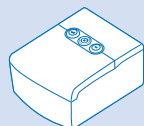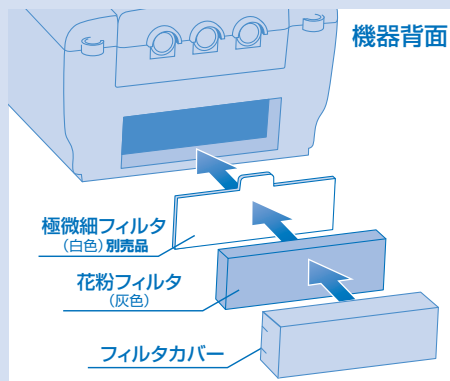


### Mシリーズ

機器背面からフィルタを取り除きます。新しいものに交換する際は右図の順で入れます。極微細フィルタ(別売品)を使用しない場合は花粉フィルタのみを交換します。

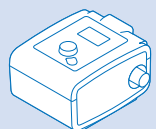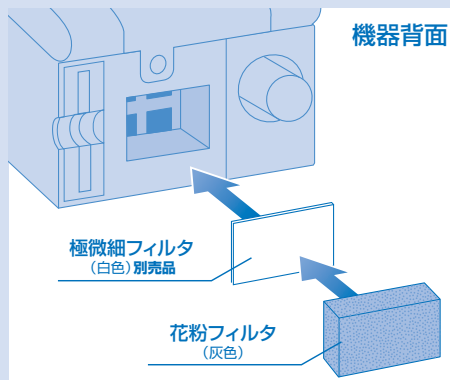

### System Oneシリーズ

機器背面からフィルタを取り除きます。新しいものに交換する際は右図の順で入れます。極微細フィルタ(別売品)を使用しない場合は花粉フィルタのみを交換します。

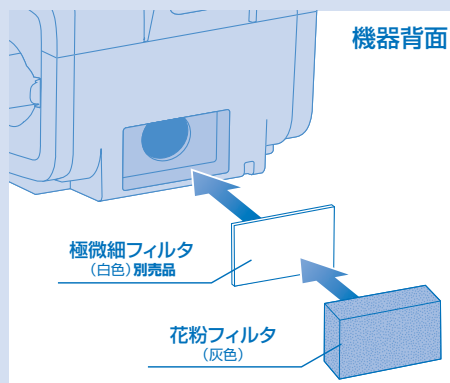


フィルタの交換・洗浄周期は右上の「付属品のお手入れ」の項を参照下さい

## 付属品のお手入れ

### マスク・呼吸回路


▶ 毎日

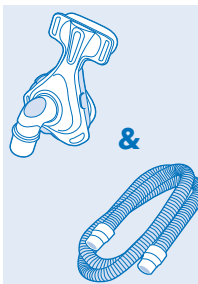

中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。

### ヘッドギア


▶ 1週間

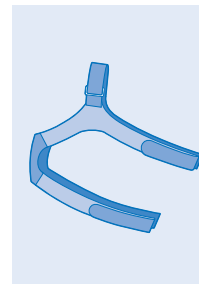

マスクからはずし中性洗剤をうすめたぬるま湯でもみ洗いします。洗たく機で洗う際は洗たく用ネットに入れます。

### 花粉フィルタ (灰色)


▶ 2週間

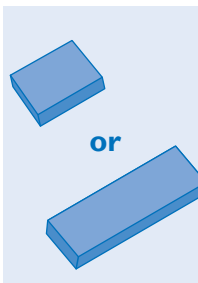

必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、よくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。

### 給水タンク・チェンバー

▶ 毎日

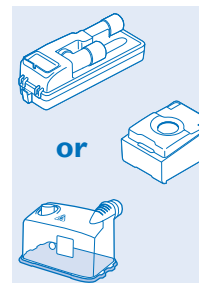

中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。



注意

付属品(マスク・回路など)をお手入れする際は、以下のことをお守り下さい。

- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当りの良い場所で干さない。

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips-respironics.jp

© 2010 Philips Respironics GK PN 1078639 110617 R3-S

販売名: イージーライフ ネーザルマスク 医療機器届出番号: 11B1X00022000039  
販売名: レムスターシリーズ 医療機器承認番号: 21400BZY00262000  
販売名: BiPAPハーモニー 医療機器承認番号: 21600BZY00394000  
販売名: レムスター Mシリーズ 医療機器承認番号: 21800BZX10110000  
販売名: レムスターAuto PRIシステム 医療機器承認番号: 22200BZX00874000

一般医療機器  
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

### お客さまコールセンター

☎ 0120-48-4159 (よるはよいこぎゅう)

受付時間: 平日9:00~17:00 土10:00~17:00 ※日・祝日休業  
専用ホームページ <http://www.48-4159.com/>